

VIDEO COPY AP-03M

ついに極限のコンパクトサイズを実現



コンパクト

幅154mm・高さ89.5mm・奥行き256mmのコンパクトサイズを実現。省スペース設置を可能にします。

※当社従来機との比較で高さ8mm、奥行き29mmの小型化を実現。

使いやすい

デジタルならではの正確な調整はもちろん、アナログライクな微調整も可能に。フロントのスイッチでさまざまなモードをカンタンに選べます。

スピード

新開発高速プリントメカ、新開発イメージプロセッシングIC採用で、業界最速*3.3秒高速プリントを実現。さらに大容量メモリでプリントの待ち時間を短縮します。

*感熱紙記録方式画像プリンタにおいて(ノーマルサイズ100×75mm印画時、2003年5月現在当社調べ)

高画質

1280ドット/100mmの高解像度サーマルヘッドの採用と高密度・強光沢紙のAT-95SGとの組み合わせで325dpiのきれいな画像を再現します。


本カタログ掲載商品は、配送・設置調整・据付工事が要する場合費用が別途必要になります。

浅沼商会 モノクロ ビデオ サーマルプリンター

使いやすさ、高画質など、さまざまな現場ニーズにお応えします。

カンタン

モニターを見ながら、パネルのボタンでプリント画のブライトネス、コントラストを調節可能。さらにファンクションボタンでメモリー画選択など、さまざまな機能の設定がおこなえます。

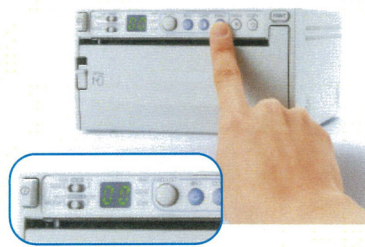

キレイ


高解像度サーマルヘッドと新開発イメージプロセッシングICの搭載で、325dpiの美しい再現力を実現。

※当社従来機：260dpiとの比較

ベンリ

任意の箇所をすぐに拡大・縮小できます。0.5~2.0倍まで0.1倍ステップで倍率設定でき、用途に応じた最適サイズのプリントが可能です。

外形寸法 (単位/mm)

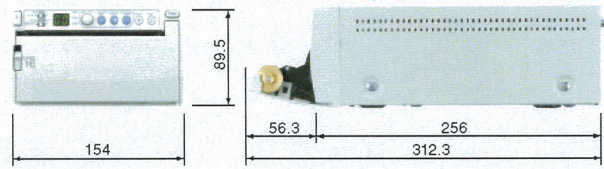

多様なプリントタイプが選べます

SIZE / MODE	SIDE	NOR	1:1
SINGLE			
MULTI			プリント不可
EXP.			プリント不可

仕様

項目	内容			
プリント方式	サーマルラインヘッドによる感熱紙記録方式			
ヘッド解像度	1280 (ドット) / 100MM (325dpi)			
プリント解像度 (ドット)	アンダースキャン	プリントサイズ	NTSC	PAL
		ノーマル	1280×500	1280×600
	オーバースキャン	サイド	1280×1250	1280×1275
		ノーマル	1280×478	1280×574
サイド	1280×1195	1280×1256		
階調 階調	256階調			
プリントサイズ (mm)	アンダースキャン	プリントサイズ	NTSC	PAL
		ノーマル	100×75	100×75
	オーバースキャン	サイド	130×98	133×99
		ノーマル	100×76	100×76
サイド	122×93	128×98		
プリント時間 (秒)	3.3秒/枚 (ノーマル/アンダースキャン 100×75mm使用時)			
入出力端子	コンポジットビデオ信号 (BNC)			
外形寸法 (mm)	幅154×高さ89.5×奥行256			
質量	約2.8kg			
電源	AC100V 50/60Hz			
消費電流	1.5A (印画時)、0.2A (待機時)			
付属品	取扱説明書、感熱記録紙 (強光沢紙 AT-95SG) クリーニングペーパー			

オプション (別売)

項目	個数	仕様・規格
AC電源コード	1本	国内向、アース付125V-7A白色、L型コネクタ1.8m
ACプラグ3P-2P変換	1個	アース線付 125V-15A
信号ケーブル	1本	BNC(P)-BNC(P) 3C-2Vケーブル片側L形2m
等電位化導線	1本	両側ラグ端子付、AWG14 3m長

消耗品

品名	形名	寸法	仕様
感熱記録紙	AT-95SG	110mm×18m	強光沢感熱ロール紙
	AT-95	110mm×21m	高濃度感熱ロール紙

* 本体をお買い求めになりました販売店へご注文をお願いします。

安全に関するご注意 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」ならびに「使用上のご注意説明書」をよくお読みください。

水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

本カタログに記載の製品は、日本国内用です。日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

■カタログ記載内容：2010年9月現在
■仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。

お問合せは下記どうぞ



〒279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 TEL 047 (304) 3240
NBF新浦安タワー5階 FAX 047 (304) 3241
〒550-0015 大阪市西区南堀江1-18-4 TEL 06 (6538) 3114
住友生命湊町M Tビル5階 FAX 06 (6538) 3115